



## 法国 Scan 500 型自动影像菌落计数仪

**全自动计数 —— 界面友好 —— 结果可靠**




436-000  
Scan 500 型自动影像菌落计数仪

自动影像分析菌落计数仪广泛应用于食品和饮料的品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、医院临床检验、化妆品检验和药品的品质和质量检测等等，适用于对微生物的菌落计数和计算、抗生素的抗菌性测试和菌种筛选等，是现代微生物检测实验室先进和高效的菌落计数器。

- ✓ 一键操作
- ✓ 亮度、对比度和灵敏度由软件自动优化
- ✓ 一个游标优化计数条件
- ✓ 自动分离成群的菌落
- ✓ 可进行抑菌圈测试
- ✓ 一个窗口处理所有功能
- ✓ 自动校正所有来自平皿的影响，适合于所有的培养基
- ✓ 不需要专门的培训即可掌握
- ✓ 输出 Excel 电子表格格式
- ✓ 可应用平皿快速扫描

### 技术指标

● CCD 彩色数码摄像头	● 仅用一个游标即可优化计数条件
● 摄像头分辨率: 640 x 480 pixels	● 适用于倾倒、涂布和旋转接种的平皿
● 采用长寿命的 LED 光源	● 自动计数结果计算
● 不锈钢外壳, 便于清洁	● 包括光源和背景颜色的 6 种组合形式, 即: 透射光(下部光源)和投射光(上部光源)设计
● 集成小型化, 仅 24cm 宽	● 亮视野和暗视野背景测试平台设计
● 英语/法语等多语言操作环境	● 多边形去除区域设定
● 支持 Windows XP 软件操作平台	● 最小菌落计数规格: <0.1mm
● 电源: 220V/110V, 50/60Hz	● 抑菌圈测定分辨率: <0.05mm
● ISO 9001:2000, CE 认证	

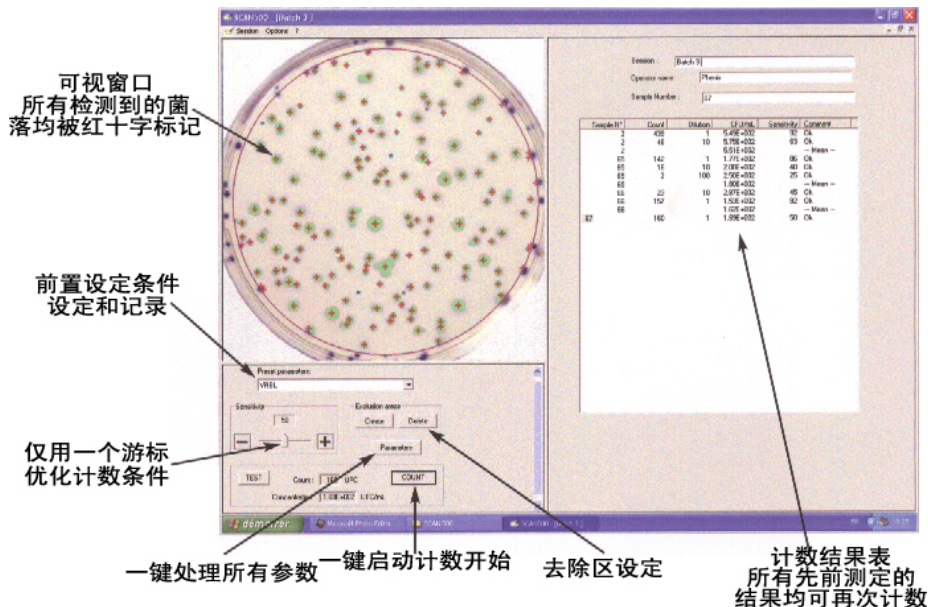

**北京吉诺思愿与所有同仁们携手并进, 开创未来!**

中国总代理:	北京吉诺思科贸有限公司
北京市海淀区长春桥路 11 号北京亿诚大厦 C2-502 室 (邮政编码: 100089)	
电话: (010) 51659588      传真: (010) 82034493      免费咨询电话: 800-810-0977	
公司网站: <a href="http://www.geno-tech.com.cn">http://www.geno-tech.com.cn</a> 电子信箱: <a href="mailto:info@geno-tech.com.cn">info@geno-tech.com.cn</a>	